

Gebrauchsanweisung

Sensify Deaktivierungsschalter


Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

Sie benötigen

Ein kleiner Schraubendreher oder eine Büroklammer erleichtern Ihnen die vorzunehmenden Einstellungen über die CLR- und LRN-Tasten.



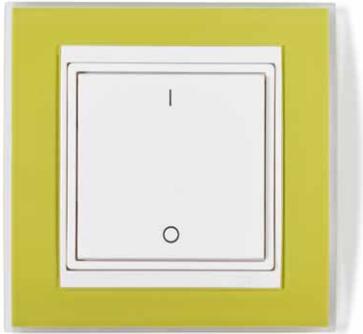

Der Deaktivierungsschalter ermöglicht, das Völker Sensify System manuell zu steuern und es können bis zu 3 Verzögerungszeiten eingestellt werden. Die Sensify Bettsensoren können damit jederzeit auf Wunsch außer Betrieb gesetzt werden. Spätestens nach 15 Min. wird das System automatisch wieder aktiviert.

Wichtig: Voraussetzung für das Anlernen des Deaktivierungsschalters ist, dass bereits ein Sensify System am Funk-Empfänger angelernt ist.


1. Vorbereitung

Damit Sie den neuen Schalter an den Funk-Empfänger anlernen können, ziehen Sie den Funk-Empfänger aus der Steckdose und gehen Sie nach folgenden Schritten vor.

2. Programmierung



1. Stecken Sie den Funk-Empfänger in die Steckdose und versorgen diesen so mit Strom. Die LRN-Taste leuchtet dauerhaft rot.
-

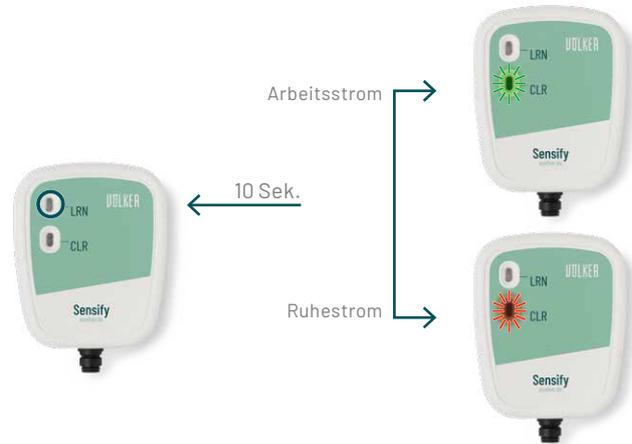

2. Drücken Sie die LRN-Taste ca. 10 Sek. bis die CLR-Taste grün blinkt (Arbeitsstrom) oder rot blinkt (Ruhestrom), je nachdem welches Rufanlagen-System Sie nutzen.
-




3. Drücken Sie jetzt 3× schnell hintereinander auf die 0 des Sensify Deaktivierungsschalters. Die CLR-Taste leuchtet kurzzeitig (2 Sek.), dauerhaft grün (Arbeitsstrom) oder rot (Ruhestrom). Das erneute Blinken signalisiert, dass der Schalter erkannt wurde.

4. Zum Speichern der Einstellung, die CLR-Taste kurz drücken. Die LRN-Taste leuchtet wieder dauerhaft rot.

3. Funktionskontrolle

Drücken Sie nun die 0 auf dem Deaktivierungsschalter und setzen Sie das Völker Sensify System für ca. 15 Min. außer Funktion. LRN- und CLR-Taste müssen gleichzeitig rot blinken. Das System wird über das Drücken der 1 auf dem Schalter sofort wieder aktiviert. Wenn Sie das System nicht aktiv über den Schalter aktivieren, schaltet sich das System automatisch nach 15 Min. wieder ein.

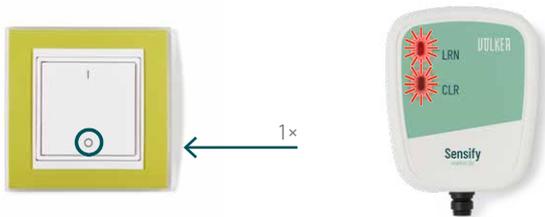

4. Löschen aller Einstellungen

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Installation nicht wie beschrieben funktioniert.

Dann empfiehlt es sich, den Funk-Empfänger komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Durch Ziehen und Wiedereinstecken des Funk-Empfängers in die Steckdose kann die Einstellung innerhalb von 30 Sek. gelöscht werden.
2. Die LRN-Taste ca. 10 Sek. drücken, bis die CLR-Taste blinkt.
3. Die CLR-Taste ca 3 Sek. drücken, bis das Licht kurz ausgeht, bevor es wieder grün blinkt. Der Funk-Empfänger befindet sich jetzt wieder im Auslieferungszustand und kann entsprechend der Bedienungsanleitung neu eingestellt werden.

5. Befestigen Deaktivierungsschalter

Bringen Sie den Sensify Deaktivierungsschalter mit dem Doppelklebeband im Außenbereich des Zimmers an, so dass Sie ihn gut vor dem Öffnen der Tür betätigen können.



6. Bedienung Deaktivierungsschalter

- Wenn Sie das Zimmer betreten, drücken Sie auf die „0“: so deaktivieren Sie die Meldung für 15 Min..
- Verlassen Sie das Zimmer, drücken Sie auf die „1“: die Meldung ist wieder aktiviert.
- Sollten Sie die Aktivierung vergessen, schaltet sich das System nach 15 Min. wieder selbständig scharf.
- Halten Sie sich also länger im Zimmer auf und die Tür war während der Zeit geschlossen, wird ein Signal an die Rufanlage gesendet. Lassen Sie die Tür geöffnet, wird der Schalter erst wieder beim Schließen der Tür aktiviert.

7. Zeit einstellen

Sie können die Deaktivierungszeit ganz einfach den aktuellen Pflegezeiten anpassen:

15 Min.

- 1× „0“ drücken
- CLR-Taste und LRN-Taste blinken 2× rot

30 Min.

- 2× „0“ drücken
- CLR-Taste und LRN-Taste blinken 2× gelb

60 Min.

- 3× „0“ drücken
- CLR-Taste und LRN-Taste blinken 2× grün

Wenn Sie früher wieder das Zimmer verlassen, können Sie das System durch das Drücken der „1“ wieder aktivieren.

8. Technische Daten

	Wandsender
Sendeleistung	10 mW
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +65 °C
Rel. Luftfeuchte	0% bis 95%
Approbationen	CE
Maße	75 × 17 mm
Schaltweg	1,5 mm

9. Herstellergarantie ☹

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einer Reklamation senden Sie bitte das zu beanstandende Produkt mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung an uns zurück. Den Rückversand nehmen Sie bitte frei Haus vor!

10. Wartung und Pflege

Völker Sensify Produkte können vorsichtig mit einem weichen Pfllegetuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

11. Desinfektion

Benutzen Sie handelsübliche Desinfektionsmittel.

12. Hersteller Vertriebspartner

Hersteller von Völker Sensify Deaktivierungsschalter

IQfy GmbH

Am Stadion 2

58540 Meinerzhagen

+49 2354 / 9449969

info@iqfy.de

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz** DE278220762

**Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn
Handelsregister** HRB 7382

Geschäftsführer Andreas Thometzek

Exklusiver Vertriebspartner

Völker Sensify Deaktivierungsschalter

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630