

Gebrauchsanweisung Sensify Notruf-Button

Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

1a. Anlernen als eigenständiger Notruf im Arbeitsstrom-Modus



1. Das Adapterkabel muss in den Funk-Empfänger gesteckt werden. Stecken Sie dann den Funk-Empfänger in die Steckdose. Die CLR-Taste Anzeige blinkt grün (Anlernmodus).
-



2. Drücken Sie kurz und schnell 3× hintereinander auf den Sensify Notruf-Button. LRN-Taste leuchtet jetzt dauerhaft rot. Notruf-Button und Funk-Empfänger bilden jetzt eine Einheit. Die Verbindung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.
-




3. Verbinden Sie das Adapterkabel mit Ihrer Rufanlage. Die Anzeige auf dem Funk-Empfänger signalisiert die Einsatzbereitschaft mit LRN-Taste dauerhaft rot.
-

1b. Anlernen als eigenständiger Notruf im Ruhestrom-Modus



1. Das Adapterkabel muss in den Funk-Empfänger gesteckt werden. Stecken Sie dann den Funk-Empfänger in die Steckdose. Die CLR-Taste blinkt grün (Anlernmodus).

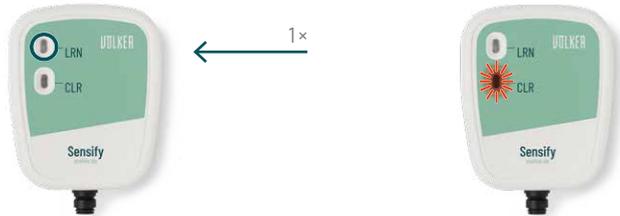

2. Drücken Sie einmal kurz auf die LRN-Taste. Der Funk-Empfänger wird dadurch in den Ruhestrom umgestellt. Die CLR-Taste blinkt rot.



3. Drücken Sie kurz und schnell 3× hintereinander auf den Sensify Notruf-Button. LRN-Taste leuchtet jetzt dauerhaft rot. Notruf-Button und Funk-Empfänger bilden jetzt eine Einheit. Die Verbindung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.




4. Verbinden Sie das Adapterkabel mit Ihrer Rufanlage. Die Anzeige auf dem Funk-Empfänger signalisiert die Einsatzbereitschaft mit LRN-Taste dauerhaft rot.

2. Anlernen, wenn Sensify Bett-Sensoren oder Sensify Sensor-Matratze bereits an den Funk-Empfänger angelernt wurden.



1. Durch ziehen und wieder einstecken des Funk-Empfängers kann dieser nur innerhalb der nächsten 30 Sek. programmiert werden. Die LRN-Taste leuchtet rot.
-

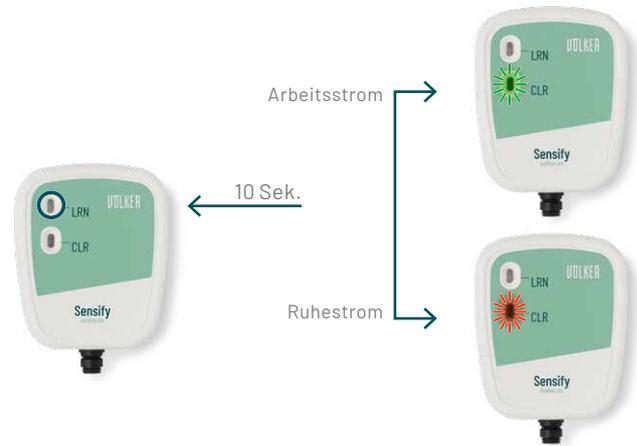

2. Drücken Sie die LRN-Taste ca. 10 Sek. bis die CLR-Taste grün blinkt (Arbeitsstrom) oder rot blinkt (Ruhestrom), je nachdem welches Rufanlagen-System Sie nutzen.
-



3. Drücken Sie jetzt 3× schnell hintereinander auf den Notruf-Button. Die CLR-Taste leuchtet kurzzeitig (ca. 2 Sek.), dauerhaft grün (Arbeitsstrom) oder rot (Ruhestrom). Das erneute Blinken und ein akustischer Ton signalisieren, dass der Notruf-Button erkannt wurde.

4. Zum Speichern der Einstellung die CLR-Taste kurz drücken. Die LRN-Taste leuchtet wieder dauerhaft rot.

3. Interessantes für die Haustechnik

Bevor Sie einen bereits angelernten Sensify Funk-Empfänger einem anderen Sensify Produkt wie etwa einem Bett-Sensor oder einem Sitzkissen zuordnen, setzen Sie ihn bitte in den Auslieferungszustand zurück.

4. Löschen aller Einstellungen

1. Durch ziehen und wieder einstecken des Funk-Empfängers in die Steckdose kann die Einstellung innerhalb von 30 Sek. gelöscht werden.

2. LRN-Taste ca. 10 Sek. drücken, bis die CLR-Taste blinkt.

3. CLR-Taste ca. 3 Sek. drücken, bis das CLR-LED aus ist.

4. Kurz darauf blinkt die CLR-Taste wieder grün. Der Funk-Empfänger befindet sich jetzt im Auslieferungszustand und kann entsprechend der Beschreibung neu eingestellt werden.

5. Wartung und Pflege

Der Sensify Notruf-Button kann vorsichtig mit einem weichen Pfllegetuch und haushaltsüblichen Mitteln gereinigt werden.

6. Desinfektion

Sprühen Sie den Notruf-Button mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel ein.

7. Technische Daten

Sendeleistung	10 mW
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchte	0% bis 93%
Approbationen	CE
Maße (D × H)	95,5 × 16 mm
Schaltweg	2 mm
Schutzklasse	IP 20
Sende-Telegramm	PTM / RPS-Typ / Data-Status - Ein 10 – 20 - Aus 00 – 20

8. Reichweite

Die gelisteten Weiten sind als grobe Richtwerte zu sehen

- im Freifeld ca. 300 m
- in geschlossenen Räumen ca. 40 m
- durch Rigips- oder Holzwände (max. 7) ca. 30 m
- durch Ziegel- oder Gasbetonwände (max. 3) ca. 20 m
- durch Stahlbetonwand oder- decke (max. 1) ca. 10 m

9. Hersteller Vertriebspartner

Hersteller von Völker Sensify Notruf-Button

IQfy GmbH

Am Stadion 2
58540 Meinerzhagen
+49 2354 / 9449969
info@iqfy.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz DE278220762

Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn
Handelsregister HRB 7382

Geschäftsführer Andreas Thometzek

Exklusiver Vertriebspartner Völker Sensify
Notruf-Button

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41(0) 44 563 1939

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31(0) 20 808 1603

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49(0) 2302 960 9630

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365