

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

VÖLKER

Matratzen

für Kliniken und Pflegeeinrichtungen



Über 100 Jahre Made in Germany. Für menschenwürdige Pflege.

Nach dieser Maxime entwickelt und produziert Völker Pflege- und Klinikbetten, in denen Patienten bestmöglich genesen können und Bewohner sich besonders wohlfühlen. Dank ihrer umfassenden Funktionalität sind unsere Betten in sämtlichen Klinik- und Pflegeeinrichtungen einsetzbar, gleichzeitig gibt ihre Optik jedem Zimmer ein besonders angenehmes Ambiente. In der Summe eine Synthese von Form und Funktion, die die Ansprüche von Patienten, Bewohnern und Pflegenden gleichermaßen erfüllt.

Original Völker Zubehör ist die ideale Ergänzung zu unseren Betten. Es erfüllt alle

relevanten Sicherheitsanforderungen und hat sich im Praxiseinsatz bestens bewährt.

Unsere Fertigung in Deutschland sichert durchgängig höchste Qualitäts- und Verarbeitungsstandards. Mit intensiver Beratung – auch nach dem Kauf –, schnellem logistischen und technischen Service sowie Fortbildungsangeboten bieten wir unseren Kunden darüber hinaus zahlreiche weitere sinnvolle Mehrwertleistungen. Das Ergebnis sind Anstöße zur Verbesserung der Pflegeprozesse, reduzierte Folgekosten und zufriedeneres Pflegepersonal – und nicht zuletzt mehr Zeit für eine menschenwürdige Pflege.

Gehen Sie auf Nummer sicher. Mit Völker Service.

Völker Service ist der Garant für größtmöglichen Werterhalt Ihrer Investition in Völker Betten. Er nimmt Ihnen auch einen Großteil der Arbeiten und Pflichten ab, die das Medizinproduktegesetz MPG und weitere gesetzliche Maßgaben mit sich bringen.

Alle unsere Servicetechniker sind qualifizierte und

erfahrene Prüfer, die mit den zu prüfenden Medizinprodukten bestens vertraut sind. Sie prüfen und warten Ihre Betten sorgfältig und unter Beachtung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben.

Festgestellte Mängel werden in der Regel sofort – und damit kostenoptimal – behoben.

Zusätzlich erstellt Völker Service auch eine detaillierte sowie rechtssichere Dokumentation und kontrolliert sämtliche Unterlagen auf ihre Vollständigkeit.

Gerne beraten wir Sie zu dem für Sie optimalen Leistungsumfang von Völker Service. Sprechen Sie uns an.





Original Völker Matratzen. Liegen auf höchstem Niveau.

Original Völker Matratzen sind gleichermaßen perfekt geeignet für den Einsatz in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie bieten Patienten und Bewohnern ein Maximum an Schlaf- und Liegekomfort. Darüber hinaus erfüllen sie – besonders wichtig für den Klinikeinsatz – auch alle Anforderungen in puncto Hygiene. Das Lieferprogramm umfasst derzeit vier Modelle mit jeweils unterschiedlicher Charakteristik. Dies ermöglicht es Ihnen, gezielt die Matratze auszuwählen, die für Ihre Anwendungssituation optimal ist.

Alle Völker Matratzen werden ausschließlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt – sowohl was die Materialauswahl betrifft als auch den Fertigungsprozess. Verschiedene Güte- und Prüfsiegel sind sichtbares Zeichen dieser Qualität, die auch durch eine Vielzahl von Gutachten belegt wird – Details hierzu weiter hinten in dieser Broschüre. Sie können also sicher sein, dass original Völker Matratzen den Ansprüchen des Klinik- und Pflegealltags jederzeit gerecht werden – und dies auch noch nach langer Einsatzdauer.



Völker Basic 1000

- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 1-Schichtaufbau
- Zweiseitig verwendbar
- Formstabil
- Einfaches Handling
- Pflegeleicht und hygienisch




Völker Comfort 2000

- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 2-Schichtaufbau
- Die spezielle Würfelschnitttechnik in der Liegefläche sorgt für eine gute Körperanpassung und reduziert den Auflagedruck. Die voneinander unabhängigen Würfel fördern die Luftzirkulation und reduzieren die Bildung von Feuchtigkeit. Dadurch werden Hautirritationen vermieden und die Scherkräfte verringert.
- Der Fersenbereich mit seiner speziellen Entlastungszone bietet eine schonende Unterstützung für Fersen und Fußknöchel.
- Der verstärkte Randzonenbereich bietet erhöhte Sicherheit und ermöglicht ein besseres Ein- und Aussteigen aus dem Bett.
- Pflegeleicht und hygienisch
- Für Personen mit hohem Dekubitusrisiko zur Prophylaxe und Therapie bei Dekubitusrisiko 1-4 bzw. Kategorie III nach EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Geprüft durch BerlinCert.


Völker Visco 3000

- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 2-Schichtaufbau
- Liegefläche aus viscoelastischem Spezialschaum, der sich den Körperkonturen anpasst und den Auflagedruck reduziert.
- Der spezieller Profilschnitt auf der Unterseite des Viscoschaumes fördert die Luftzirkulation und reduziert die Bildung von Feuchtigkeit. Dadurch werden Hautirritationen vermieden und die Scherkräfte verringert.
- Der verstärkte Randzonenbereich bietet erhöhte Sicherheit und ermöglicht ein besseres Ein- und Aussteigen aus dem Bett.
- Pflegeleicht und hygienisch

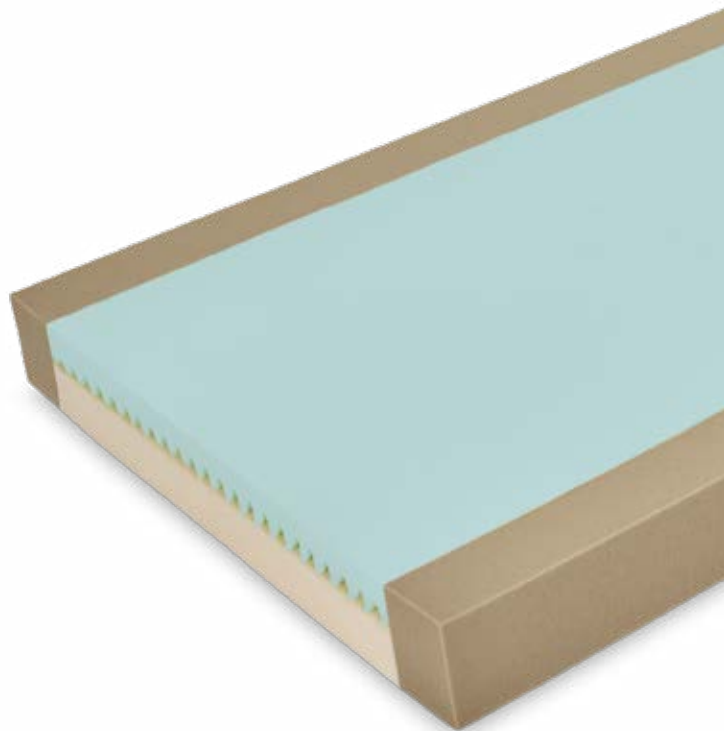


Völker Pro-Visco 4000

- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 3-Schichtaufbau
- 4 cm viscoelastische, druckentlastende Oberschicht
- 6 cm druckausgleichende Kaltschaum Mittelschicht
- 4 cm tragende Kaltschaum Unterschicht
- Liegefläche aus viscoelastischem Spezialschaum, der sich den Körperkonturen anpasst und den Auflagedruck reduziert.
- Der Fersenbereich mit seiner speziellen Entlastungszone bietet eine schonende Unterstützung für Fersen und Fußknöchel.
- Der verstärkte Randzonenbereich bietet erhöhte Sicherheit und ermöglicht ein besseres Ein- und Aussteigen aus dem Bett.
- Pflegeleicht und hygienisch
- Für Personen mit hohem Dekubitusrisiko zur Prophylaxe und Therapie bei Dekubitusrisiko 1-4 bzw. Kategorie III nach EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Geprüft durch BerlinCert.

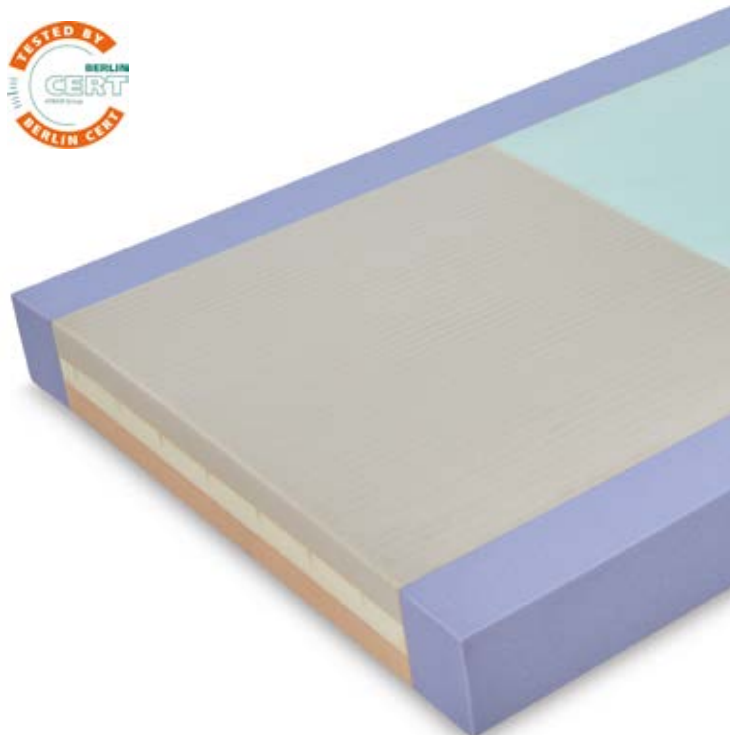


Technische Daten

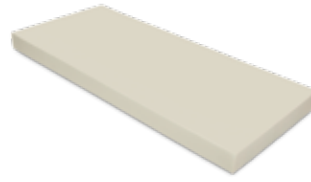

| Modell | Völker Basic 1000 | Völker Comfort 2000 |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung (Matratzenaufbau, -materialien, -schichthöhen) | 1-Schicht HR-Kaltschaum | 2-Schicht HR-Kaltschaum |
| Min. Patientengewicht | 20 kg | 20 kg |
| Max. Patientengewicht | 195 kg | 195 kg |
| Höhe | 12 cm | 12 cm |
| Breite | 88 cm | 88 cm |
| Länge | 200 cm | 200 cm |
| Eigengewicht der Matratze | 9,6 kg | 9,8 kg |
| 1-schichtig | ja | - |
| 2-schichtig | - | ja |
| 3-schichtig | - | - |
| Visco | - | - |
| Zweiseitig verwendbar | ja | - |
| Randzonenverstärkung | - | ja |
| Breite der Randzonenverstärkung | - | 10 cm |
| Oberschicht RG / Stauchhärte kPa | RG 40 / 4,0 kPa | Würfel RG 50 / 3,0 kPa |
| Mittelschicht RG / Stauchhärte kPa | - | - |
| Unterschicht RG / Stauchhärte kPa | - | RG 30 / 3,4 kPa |
| Fersenzone RG / Stauchhärte kPa | - | Softline RG50 / 1,5 kPa |
| Randzone RG / Stauchhärte kPa | - | RG 40 / 6,0 kPa |
| Druckentlastungsklasse | - | D (geprüft durch BerlinCert) |
| Röntgendurchlässig und latexfrei | ja | ja |
| Schwerentflammbar DIN 597 1+2 | ja | ja |
| Kern bis zu 75 °C autoklavierbar | ja | ja |

Alle Matratzen sind auch in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich – passend zur Bettenliegefläche.

* Auch in 14 cm Höhe verfügbar

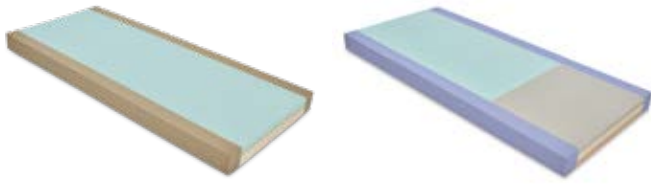

| Völker Visco 3000 | Völker Pro-Visco 4000 |
|----------------------------|------------------------------|
| 2-Schicht HR-Kaltschaum | 3-Schicht HR-Kaltschaum |
| 20 kg | 20 kg |
| 195 kg | 195 kg |
| 12 cm | 12 cm * |
| 88 cm | 88 cm |
| 200 cm | 200 cm |
| 9,8 kg | 10 kg |
| - | - |
| ja | - |
| - | ja |
| ja | ja |
| - | - |
| ja | ja |
| 10 cm | 10 cm |
| Visco RG 50 / 1,5 kPa | Visco RG 50 / 1,5 kPa |
| - | RG 60 / 2,5 kPa |
| RG 40 / 4,0 kPa | RG 50 / 4,0 kPa |
| - | Softline RG50 / 1,5 kPa |
| RG 40 / 6,0 kPa | RG 50 / 5,0 kPa |
| - | H (geprüft durch BerlinCert) |
| ja | ja |
| ja | ja |
| ja | ja |

Bezug

- Farbe: grau (siehe links)
- Textiler Träger: 100% Polyester,
Nässesperrschicht: 100% Polyurethan
- 2 Wendegriffe
- Bi-elastisch
- Bakterien-, milben- und virendicht
- Allergikergeeignet
- Anti-Bakteriell beschichtet: Preventol MP100 bei Lanxess
- Wasser- und Urinundurchlässig
- Schwerentflammbar nach UNI 9175:
Klasse 1M + BS 7175 crib5
- Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette
- Beständig gegen Desinfektionsmittel nach VAH & RKI
- Bis 95 °C waschbar
- Bis 105 °C autoklavierbar
- Flächengewicht: 190g/m² ± 10
- Wassersäule nach UNI EN 20811 > 200 cm
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
> 500 g/m² / 24 h
- Reißverschluss durchgehend über eine Längsseite
und beide Schmalseiten
- Bezug abnehmbar

Gutachten und Zertifikate

- ISO 9001:2008
- ISO/TS 136949:2009
- Öko-Tex: Klasse 1, Produkte für Babys
- Biokompatibilität nach ISO 10993-10
- Schwerentflammbarkeit nach DIN 597 1+2
und nach BS 7175
- Wasser- und Urinundurchlässigkeit
- Bakterien-, milben- und virendicht
- Druckprüfung BerlinCert
- Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Latexfrei

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

©2018 Völker | Alle Rechte vorbehalten

VÖLKER

www.voelker.de