



**Klinikbett**

**S 962-2**

Völker. Nah am Mensch

**VÖLKER**

# Wohnlicher Komfort

## Bei steigenden Pflegeanforderungen.

Das Völker Klinikbett S 962-2 erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen in Kliniken. Es ermöglicht Patienten, auf sichere Weise und mit Unterstützung durch das Pflegepersonal die verschiedenen Stufen der Mobilisation zu durchlaufen – vom Sitzen in der Komfortsitzposition bis zum Aufstehen und Verlassen des Bettes. Auch als waschstraßentaugliches Modell S 962-2 W verfügbar.

Durch eine gelungene Kombination aus Form und Funktion sorgen Völker Klinikbetten für mehr Patientenkomfort und ermöglichen Pflegekräften ein sicheres und effizientes Arbeiten. Das einzigartige Healthcare Design von Völker sorgt dafür, dass Betten ihren medizinischen Zweck erfüllen und gleichzeitig ein wohnliches Ambiente schaffen, welches das Wohlbefinden und die Genesung von Patienten unterstützt.

## Überzeugt gleich dreifach

- ✓ Geteilte höhenverstellbare Seitensicherungen – mitgeführt bei Liegeflächenverstellung.
- ✓ Mit innovativem Völker MiS® Microstimulationssystem. Für mehr Patientenkomfort und besseren Schlaf.
- ✓ Auch als waschstraßentaugliches Modell verfügbar.



**SICHERE  
ARBEITSLAST**



**GROSSER  
VERSTELLBEREICH**



**DYNAMISCHE  
VERLÄNGERUNG**



**NIEDRIGE  
BETTHÖHE**



# Sichere Mobilisierung der Patienten


## Entlastung des Pflegepersonals durch die patentierte Völker Seitensicherung.

Die eigenständige Mobilisierung der Patienten hilft bei der Regeneration nach einer Krankheitsphase. Diese Mobilisierung wird durch die Mittellücke in der Völker Seitensicherung unterstützt und reduziert die freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) durch die Seitengitter. Die stabile und mehrfach teleskopierbare Völker Seitensicherung ermöglicht den Patienten das selbstständige Aufstehen und die Zurückgewinnung des Vertrauens in den eigenen Körper. Die Völker Seitensicherung ist standardmäßig allseitig an der Liegefläche mitgeführt und bietet in jeder Liegeposition einen optimalen Schutz. Optional ist ebenfalls eine feststehend-geteilte Version der Seitensicherung erhältlich.

## Technische Daten

Sichere Arbeitslast		250 kg
Leergewicht		ca. 143 kg
Breite Liegefläche		90 / 100 cm
Länge Liegefläche		200 / 210 cm
Außenmaße		99 – 104 cm*

\*bei feststehend-geteilten Seitengitter

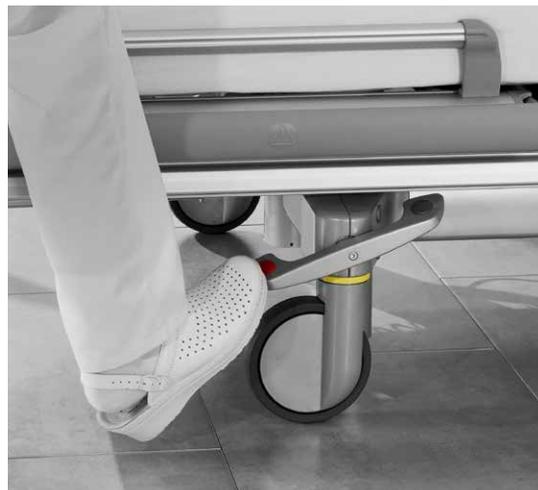

### Zentralbremse

Lässt sich auch bei niedrigster Bettposition betätigen. So ist das Bett in jeder Höheneinstellung verfahrbar.



Finden Sie mehr Infos zu den technischen Daten  
[voelker.de](http://voelker.de)



## Das Plus an Komfort und Entspannung

### Die Microstimulations-Liegefläche.


Völker bietet alle seine Liegeflächen mit dem patentierten MiS® Microstimulationssystem an, das auf neurowissenschaftlichen Grundlagen basiert. Es nimmt selbst minimale Eigenbewegungen des Patienten auf und gibt sie als taktile Reize von der Liegefläche durch die Matratze an den Körper zurück. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Rückkopplung zu einer verbesserten Körperwahrnehmung führen kann. Darüber hinaus wird der Schlaf- und Liegekomfort verbessert. In Verbindung mit der Matratze besteht die Möglichkeit zu einer Reduzierung der Dekubitus-Gefahr.<sup>1</sup>



**Optionaler Handschalter quer**  
Nur bei mitgeführt-geteilter Seitensicherung möglich.



**Automatik-Funktionen**  
Definierte Positionen mit nur einem Doppelklick schnell und einfach zu fahren. Erlaubt noch mehr Konzentration auf die Pfl egetätigkeit.

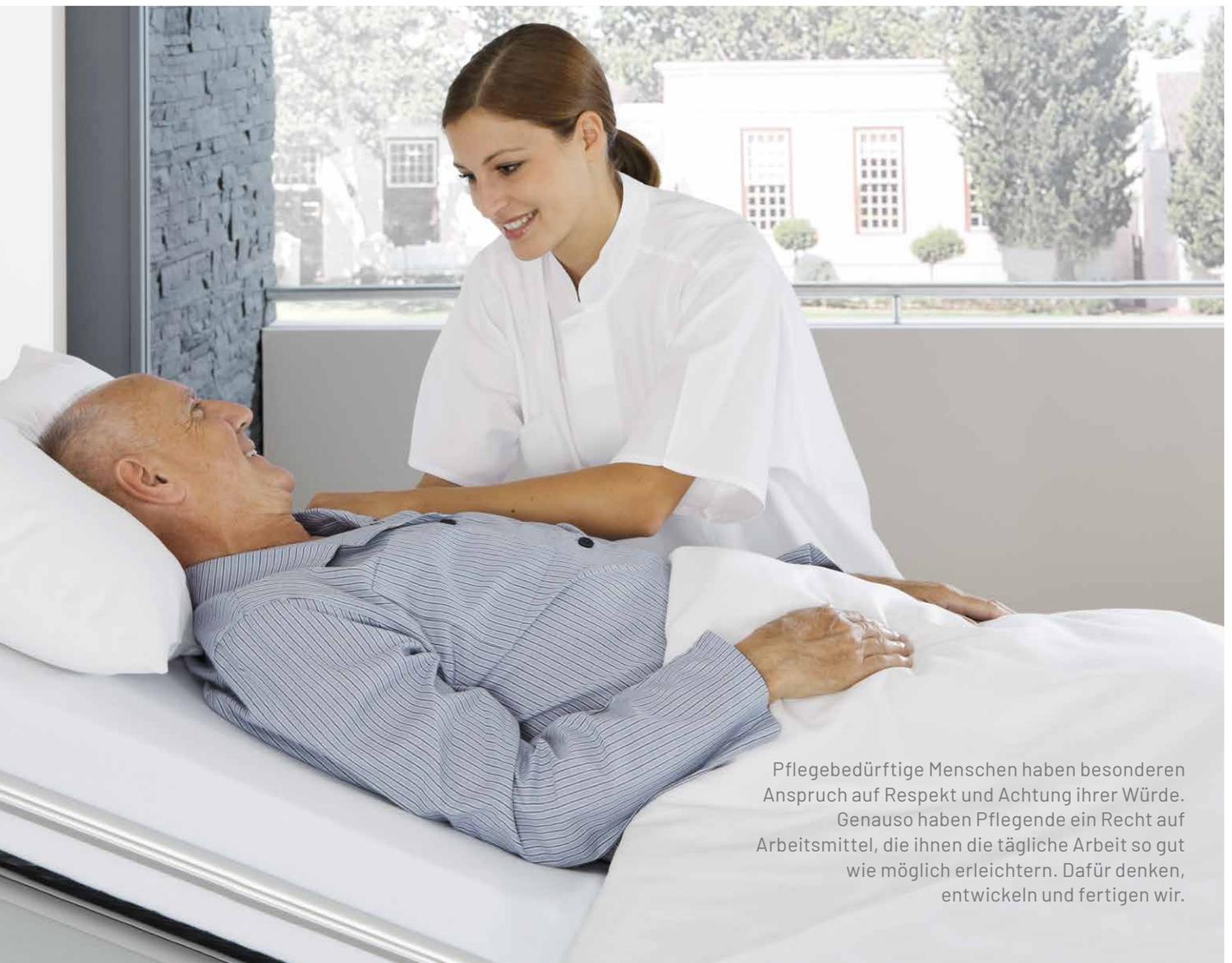

Pflegebedürftige Menschen haben besonderen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Genauso haben Pflegende ein Recht auf Arbeitsmittel, die ihnen die tägliche Arbeit so gut wie möglich erleichtern. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

24/7

**IMMER  
ERREICHBAR**



**SERVICE  
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE  
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE  
NACHHALTIGKEIT**

## Hauptsitz

### **Völker GmbH**

Wullener Feld 79  
58454 Witten  
Germany  
+49 (0) 2302 960 960

## Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Switzerland  
+41 (0) 44 563 1939

## Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Austria  
+43 (0) 1 205 8365

## Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
France  
+33 (0) 18 288 1530

## Voelker Nederland B.V.

Laan 21  
1741 EA Schagen  
Netherlands  
+31 (0) 20 808 1603

## Allgemeine Anfragen

info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

## Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630