



Klinikbett

S 966

Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

Völker S 966

Ein Bett. Mehr Möglichkeiten.

Den Bedürfnissen von Patienten gerecht werden und den Arbeitsalltag des Pflegepersonals vereinfachen – das Klinikbett Völker S 966 erfüllt beide Zielsetzungen gleichermaßen.

Patienten bietet das Völker S 966 ein Höchstmaß an Sicherheit. Darüber hinaus fördert das einzigartige Völker Gesundheitsdesign eine wohnliche Atmosphäre und unterstützt so Wohlbefinden und Genesung.

Das Pflegepersonal profitiert beim Völker S 966 von zahlreichen Verbesserungen, die das Handling vereinfachen und Zeit sparen. Das Ergebnis sind spürbare Erleichterungen im Klinikalltag.

Das Völker S 966 ist so konzipiert, dass es allen kliniktypischen Einsatzsituationen problemlos gerecht wird. Dies ermöglicht einen besonders flexiblen Einsatz und gibt Ihrer Klinik ein durchgängiges, attraktives Erscheinungsbild.

Überzeugt gleich fünffach

- ✓ Erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Sicherheit.
- ✓ Erhältlich in zahlreichen Varianten – nach dem Baukastenprinzip kombinierbar.
- ✓ Serienmäßig mit zahlreichen innovativen Völker Produktfunktionen.
- ✓ Gelungene Synthese aus Form und Funktion.
- ✓ Optional mit zentraler fünfter Rolle erhältlich.



**SICHERE
ARBEITSLAST**



**GROSSER
VERSTELLBEREICH**




**DYNAMISCHE
VERLÄNGERUNG**



**NIEDRIGE
BETTHÖHE**



TRENDELENBURG

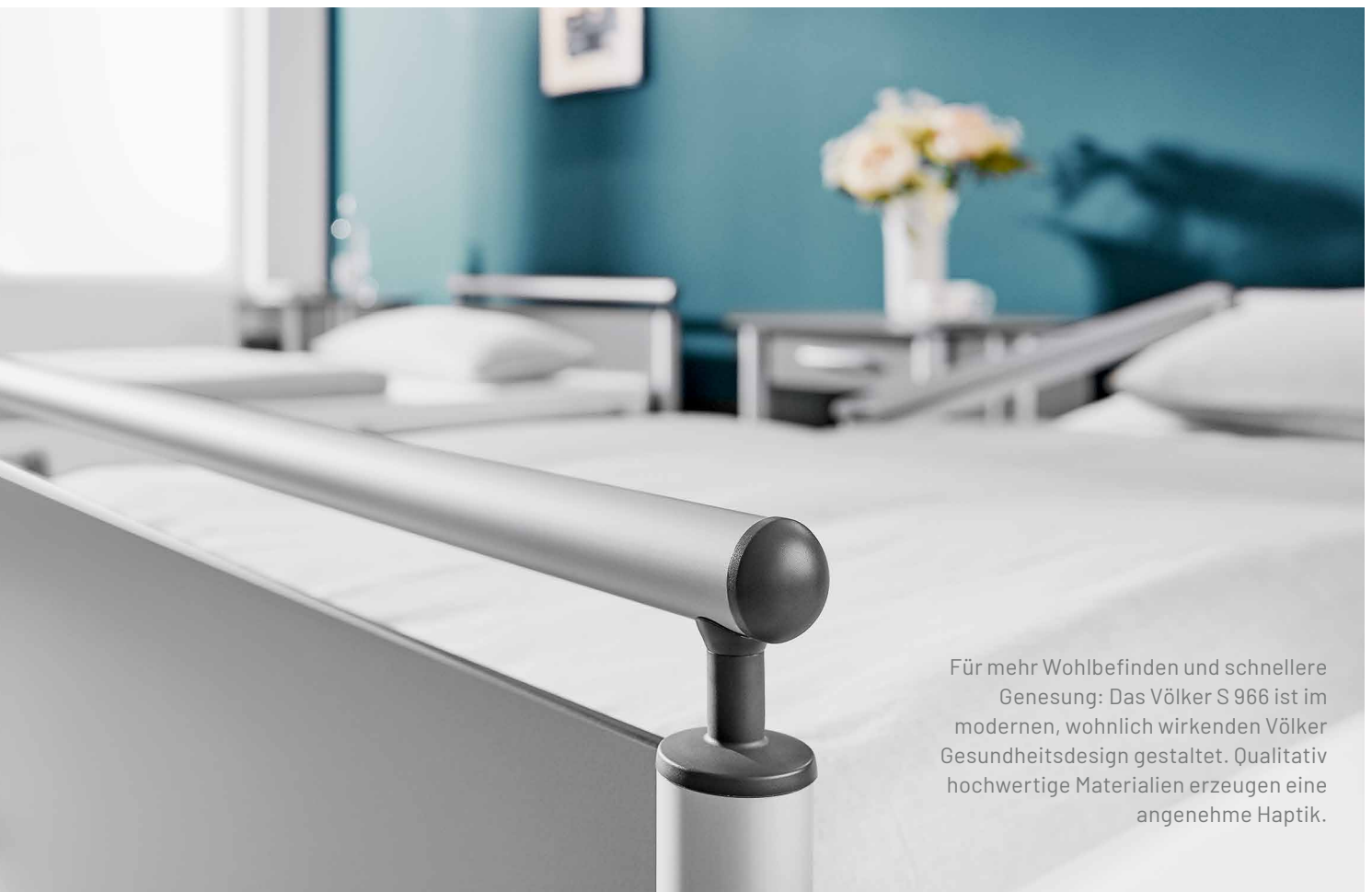






Für mehr Wohlbefinden und schnellere Genesung: Das Völker S 966 ist im modernen, wohnlich wirkenden Völker Gesundheitsdesign gestaltet. Qualitativ hochwertige Materialien erzeugen eine angenehme Haptik.

Sichere Mobilisierung der Patienten


Entlastung des Pflegepersonals durch die patentierte Völker Seitensicherung.

Die eigenständige Mobilisierung der Patienten hilft bei der Regeneration nach einer Krankheitsphase. Diese Mobilisierung wird durch die Mittellücke in der Völker Seitensicherung unterstützt und reduziert die freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) durch die Seitengitter. Die stabile und mehrfach teleskopierbare Völker Seitensicherung ermöglicht den Patienten das selbstständige Aufstehen und die Zurückgewinnung des Vertrauens in den eigenen Körper. Die Völker Seitensicherung ist standardmäßig allseitig an der Liegefläche mitgeführt und bietet in jeder Liegeposition einen optimalen Schutz. Optional ist ebenfalls eine feststehend-geteilte Version der Seitensicherung erhältlich.

Technische Daten

Sichere Arbeitslast		270 kg
Leergewicht		ca. 160 kg
Breite Liegefläche		90 / 100 cm
Länge Liegefläche		200 / 210 cm
Außenmaße		99 – 104 cm*

*bei feststehend-geteilten Seitengitter

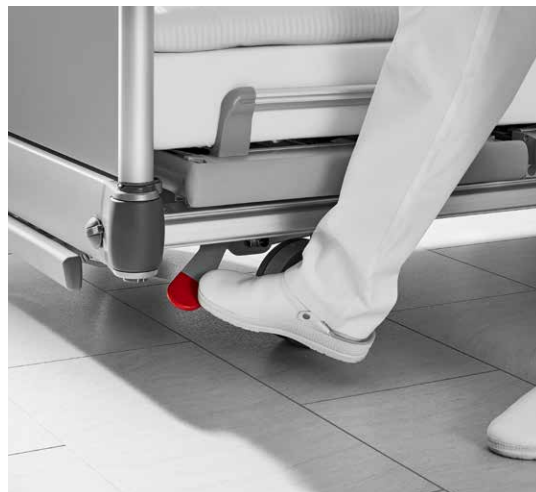

Zentralbremse

Lässt sich auch bei niedrigster Bettposition betätigen. So ist das Bett in jeder Höheneinstellung verfahrbar.



Finden Sie mehr Infos zu den technischen Daten
voelker.de



Das Plus an Komfort und Entspannung

Die Microstimulations-Liegefläche.

Völker bietet alle seine Liegeflächen mit dem patentierten MiS® Microstimulationssystem an, das auf neurowissenschaftlichen Grundlagen basiert. Es nimmt selbst minimale Eigenbewegungen des Patienten auf und gibt sie als taktile Reize von der Liegefläche durch die Matratze an den Körper zurück. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Rückkopplung zu einer verbesserten Körperwahrnehmung führen kann. Darüber hinaus wird der Schlaf- und Liegekomfort verbessert. In Verbindung mit der Matratze besteht die Möglichkeit zu einer Reduzierung der Dekubitus-Gefahr.¹



Beleuchteter Handschalter

Lässt sich einfach in die Seitensicherung einhängen und ist leicht versetzbar.



Automatik-Funktionen

Definierte Positionen mit nur einem Doppelklick schnell und einfach zu fahren. Erlaubt noch mehr Konzentration auf die Pflegetätigkeit.



Die bessere Wahl

Für Patient und Pflegepersonal.

- ✓ Geringe Betthöhe von < 30 cm. Reduziert bei einem Sturz signifikant den Schweregrad von Verletzungen.
- ✓ Kopf- und Fußteil schnell und werkzeuglos entnehmbar. Zum Beispiel bei Notfällen oder zur Reinigung.
- ✓ Große Auswahl an Farben und Dekoren – passend zu Ihren Anforderungen.



Völker bietet eine große Auswahl an praktischem und perfekt auf Völker-Betten zugeschnittenem Zubehör.



Pflegebedürftige Menschen haben besonderen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Genauso haben Pflegende ein Recht auf Arbeitsmittel, die ihnen die tägliche Arbeit so gut wie möglich erleichtern. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

24/7

IMMER
ERREICHBAR



SERVICE
IM FOKUS



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN



ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630