



Lit hospitalier
S 962-2 Vis-a-Vis

S 962-2 Vis-a-Vis de Völker

Pour faciliter la mobilisation.

Les patients qui ne peuvent ou ne veulent pas quitter leur lit ne sont pas tous complètement immobiles pour autant. Leur condition physique ou les interventions médicales qu'ils ont subies les empêchent souvent de quitter leur lit par un transfert latéral. Mais même dans ce cas, une mobilisation est possible lorsque le lit peut être réglé de manière à former une position assise ouverte vers l'avant permettant au patient de poser les pieds par terre. Ainsi, en fonction des ressources du patient, une mobilisation peut alors avoir lieu, suivie d'une activation. Le patient peut passer de la position couchée à la position assise pour finalement se lever et marcher. Grâce à leur parfaite combinaison de forme et de fonction, les lits hospitaliers Völker améliorent le confort des patients tout en permettant au personnel soignant de travailler de façon sûre et efficace. Grâce au Healthcare Design unique de Völker, les lits remplissent leur fonction médicale tout en créant une ambiance confortable qui favorise le bien-être et le rétablissement des patients.

Les quatre points forts

- ✓ Position assise ouverte vers l'avant pour une mobilité et des soins à hauteur des yeux.
- ✓ Protections latérales en deux parties et réglables en hauteur – accompagnent les mouvements du plan de couchage lors du réglage de celui-ci.
- ✓ Système de micro-stimulation innovant MiS® de Völker. Pour un meilleur confort du patient et un sommeil de meilleure qualité.
- ✓ Allègement du travail du personnel soignant grâce à la mobilisation autonome du patient.



CHARGE DE TRAVAIL SÉCURISÉE




LARGE AMPLITUDE DE MOUVEMENT



HAUTEUR DE TRAVAIL ERGONOMIQUE



POSITION PROCLIVE

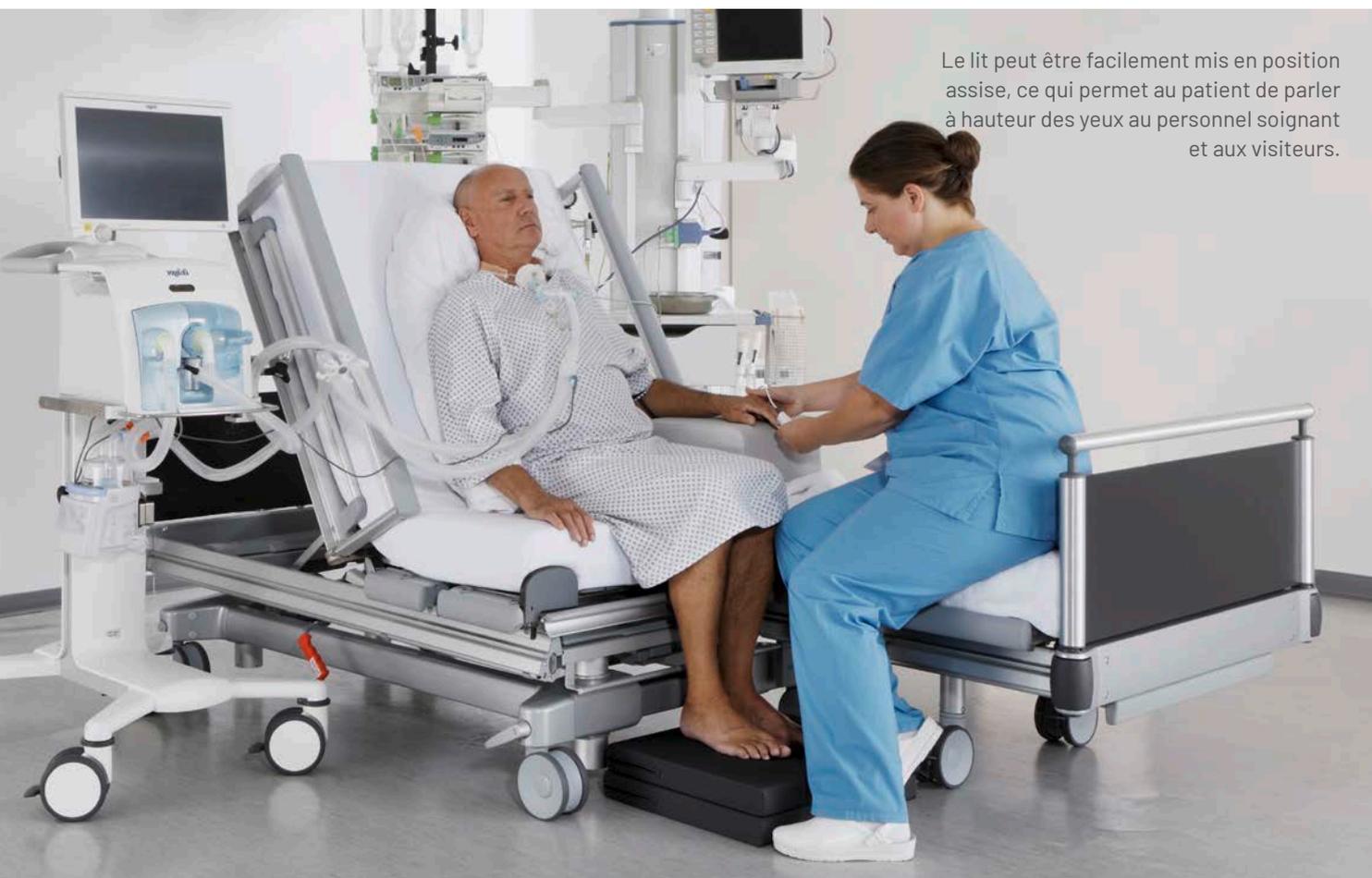

Le lit peut être facilement mis en position assise, ce qui permet au patient de parler à hauteur des yeux au personnel soignant et aux visiteurs.

Une mobilisation en toute sécurité des patients

Allègement du travail du personnel soignant grâce à la protection latérale Völker brevetée.

La mobilisation autonome des patients contribue à leur rétablissement après une maladie. L'espace situé entre les deux parties de la protection latérale Völker favorise cette mobilisation et réduit la privation de liberté qu'engendrent les barrières latérales. La protection latérale Völker stable et télescopique permet aux patients de se lever de façon autonome et de reprendre confiance en leur propre corps. La protection latérale Völker est intégrée en standard au plan de couchage, accompagnant ainsi ses mouvements de tous les côtés, et offre une protection optimale dans chaque position de couchage. Une version fixe en deux parties de la protection latérale est également disponible en option.

Données techniques

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		Env. 169 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		210 cm
Dimensions extérieures		99 cm



Pour plus d'informations sur
les données techniques
voelker.de



Le plus en matière de confort et de détente

Le plan de couchage à micro-stimulation.

Tous les plans de couchage de Völker sont équipés du système de micro-stimulation MiS® breveté, qui s'appuie sur des bases neuroscientifiques. Celui-ci enregistre les mouvements du patient, même infimes, et les restitue sous forme de stimulation tactile du plan de couchage à travers le matelas. L'expérience acquise durant ces dernières années a montré qu'une telle rétroaction peut entraîner une amélioration de la perception corporelle. La qualité du sommeil et le confort de couchage s'en trouvent par ailleurs accrus. L'action conjointe du système de micro-stimulation et du matelas peut entraîner une réduction du risque d'escarre.¹



Völker propose un large éventail d'accessoires pratiques et parfaitement adaptés aux lits Völker.



Différents pieds et têtes de lit possibles.

Matelas Finess

Matelas en deux parties pour lits Vis-a-Vis.

- ✓ Matelas en mousse froide HR haute élasticité avec structure à trois couches
- ✓ Couche centrale ferme et stabilisante
- ✓ Mousses : certifiées selon la norme Öko-Tex Standard 100, classe de produits 1
- ✓ Coupe ondulée spéciale pour une climatisation efficace
- ✓ Réduction de la formation d'humidité et meilleure circulation de l'air grâce aux canaux de ventilation supplémentaires
- ✓ Grâce à sa structure symétrique, le matelas peut être retourné 4 fois
- ✓ Le matelas avec sa housse peut être désinfecté en autoclave à 105 °C

Caractéristiques

	Finess
Coloris : gris	✓
Support textile : 100 % polyester, Couche anti-humidité : 100 % polyuréthane	✓
Bi-élastique	✓
Étanche aux bactéries, acariens et virus	✓
Antiallergique	✓
Revêtement antibactérien : Preventol MP100 de Lanxess	✓
Imperméable à l'eau et à l'urine	✓
Difficilement inflammable conformément aux normes UNI 9175 : Classe 1M + BS 7175 crib 5+7	✓
Résistant au sang, à l'urine, aux huiles et aux graisses	✓
Résistant aux produits désinfectants conformément aux normes VAH et RKI	✓
Lavable à 95 °C	✓
Stérilisable en autoclave à 105 °C	✓
Grammage : 190 g/m ² ± 10	✓
Colonne d'eau conforme à la norme UNI EN 20811 > 200 cm	✓
Perméable à la vapeur d'eau conformément à la norme DIN 53122 > 500 g/m ² /24 h	✓
Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur	✓
Housse amovible	✓





**PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ
DURABLE**

Siège

Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41(0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS
27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31(0) 20 808 1603

Questions générales
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

**Vente / Service clientèle /
Pièces de rechange**
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630