





« Nous concevons des lits hospitaliers en portant une attention particulière aux besoins des patients et du personnel soignant. La qualité Völker est la garantie de solutions durables. »

Yvonne Risch Membre de la direction

Völker Lits hospitaliers

Des solutions pour des soins plus humains.

Le quotidien de la clinique est exigeant. C'est pourquoi il est nécessaire d'accompagner le personnel soignant et les patients pour pouvoir fournir des soins de qualité et dans le respect de la personne. C'est dans cette optique que nous concevons, développons et fabriquons nos produits.

Grâce aux divers équipements et fonctionnalités en option proposés par Völker, vous pouvez adapter nos lits hospitaliers à vos propres exigences et à l'utilisation des différents services. Nous concevons nos lits en pensant à la sécurité et au confort des patients ainsi qu'à l'ergonomie lors des soins. Des matériaux de haute qualité et une conception intelligente répondent aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène et garantissent des lits hospitaliers qui durent dans le temps.









Aperçu des lits hospitaliers Völker

Données techniques



Charge de travail sécurisée		270 kg
Poids à vide		env. 160 kg
Largeur du plan de couchage		90 / 100 cm
Longueur du plan de couchage		200 / 210 cm
Dimensions extérieures	\rightarrow	99-114 cm*

^{*} disponible également en variante Protect



S 962-2/ S 962-2 W

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		env. 143 / 164 kg
Largeur du plan de couchage		90 / 100 cm
Longueur du plan de couchage	5 8	200 / 210 cm
Dimensions extérieures	\rightarrow	99-114 cm*

Disponible également en version Protect




S 962-2 Vis-a-Vis

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		env. 169 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		210 cm
Dimensions extérieures	→ •	- 99 cm



^{*}Pour toutes largeurs de lit et protections latérales.

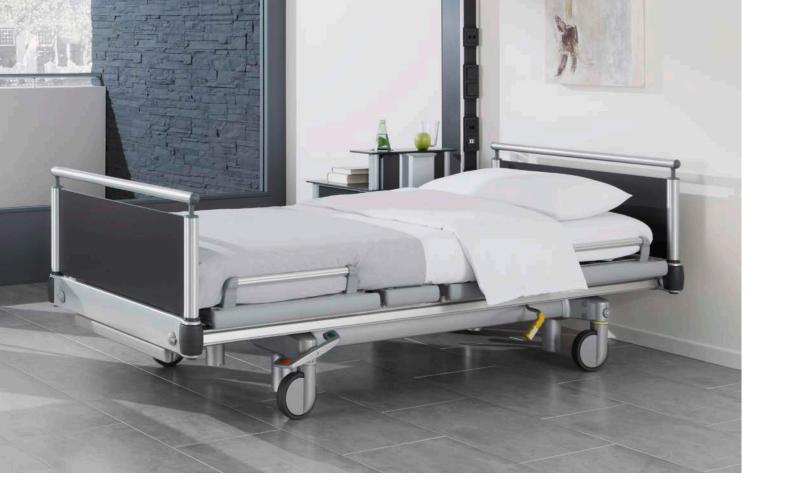

À vos côtés quelle que soit la position

Lit hospitalier S 962- 2

La maniabilité et la simplicité de déplacement du lit hospitalier S 962-2 offrent un maximum de sécurité et facilitent grandement le quotidien de la clinique. Les quatre colonnes de levage assurent la stabilité et permettent un accès optimisé sous le lit. Le nettoyage est rendu plus aisé grâce au châssis conçu pour des exigences particulièrement élevées en matière d'hygiène. En outre, il existe également une version lavable du lit hospitalier S 962-2. Nous proposons une version Protect pour les espaces avec des exigences particulières en matière de sécurité.





Le châssis lisse permet un nettoyage impeccable.

Réduction du risque de chute

Le lit surbaissé S 966

Une chute du lit occasionne souvent des blessures, ce qui augmente la convalescence des patients. Le lit surbaissé S 966 peut-être descendu jusqu'à une hauteur de 28,5 cm pour considérablement réduire ce risque. Il s'agit du seul lit surbaissé avec une protection latérale incluse.

Grâce à l'intégration de la protection latérale au plan de couchage, le frein central est facile à atteindre, même dans la position la plus basse. Le personnel soignant, quant à lui, peut travailler à une hauteur ergonomique de 88,5 cm. Une cinquième roulette centrale est disponible en option.





Une meilleure orientation et donc une réduction du risque de chute dans l'obscurité grâce à des fonctions telles que l'éclairage sous le lit et l'éclairage de la commande manuelle.



Des solutions de sécurité sur mesure

Les versions Protect

Les équipements destinés à des zones sensibles requièrent des ajustements particuliers, afin de protéger les patients et le personnel soignant. C'est la raison pour laquelle nos lits hospitaliers S 962-2 et S 966 ont été améliorés pour ces utilisations spécifiques. Les spécificités de nos versions Protect garantissent une sécurité élevée avec des ajustements ingénieux. Un plan de couchage HPL solidement fixé, des commandes manuelles amovibles, le boîtier de contrôle du personnel verrouillable et la gaine Anaconda du câble d'alimentation sont des fonctions spéciales Protect parmi tant d'autres.





Les sections tête et pied ainsi que les supports de sangle universels solidement fixés garantissent une sécurité accrue.





Des soins à hauteur des yeux et une mobilisation facilitée

Le S 962-2 Vis-a-Vis

Le fait de mobiliser le patient et de favoriser son autonomie est essentiel pour un bon rétablissement. Les patients présentant des capacités physiques réduites ou ayant subi une opération ont souvent des difficultés à se lever du lit en passant par le côté. C'est la raison pour laquelle le S 962-2 Vis-a-Vis leur permet de le faire en passant par l'avant du lit, grâce à un plan de couchage unique en son genre qui se divise en deux parties. La partie pied de lit du plan de couchage peut ainsi être déplacée pour permettre au patient de se mettre réellement en position assise. Ainsi, la mobilisation et l'autonomie sont favorisées.







Le système breveté de protection latérale Völker

Plus de sécurité - sans restriction.


La sécurité des patients est une priorité absolue dans toutes les cliniques. Le système breveté de protection latérale Völker protège vos patients à tout moment. Il se compose de protections latérales segmentées des deux côtés, qui peuvent être montées indépendamment les unes des autres en une ou deux étapes. Les éléments latéraux sont déplacés lors du réglage des sections tête et pieds, sans risque d'écrasement. Cela protège les patients des chutes involontaires, même lorsque le segment relève-buste est en position verticale. Si la protection latérale n'est pas nécessaire, elle peut être complètement encastrée dans le plan de couchage afin que toutes les fonctions du châssis restent facilement accessibles à tout moment.

Grâce à la zone de sortie de lit toujours dégagée dans la section centrale, le système de protections latérales Völker offre une protection sans restriction.

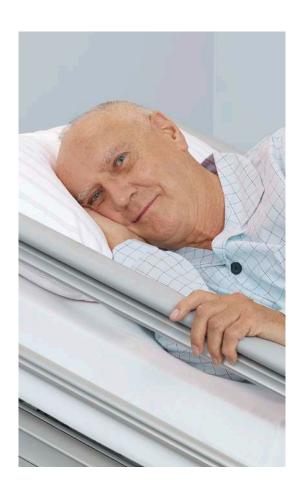

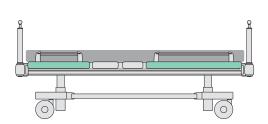

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les protections latérales peuvent être entièrement intégrées au plan de couchage.

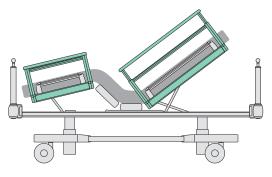

La tête et le haut du corps sont toujours protégés, même lorsque le dossier est relevé, grâce à la protection latérale incluse.



L'intégration de la protection latérale au plan de couchage permet un accès rapide au rail pour accessoires et un travail ergonomique.






La zone de sortie de lit dans la section centrale du système de protection latérale Völker est toujours dégagée et la stabilité du design permet aux patients de s'appuyer lors de la mobilisation autonome.


Un design ingénieux qui facilite la mobilisation

Ergonomique pour les patients et le personnel soignant.

Le design optimisé de la protection latérale Völker facilite le travail des soignants et favorise la mobilisation du patient. La stabilité du design empêche non seulement vos patients de rouler hors du lit, mais les aide également à se lever et à sortir du lit, ce qui soulage le travail de votre personnel soignant. Si la protection latérale n'est pas nécessaire, elle ne gêne pas grâce à son intégration au plan de couchage. Ainsi, il n'y a aucun élément gênant sous le plan de couchage. Cela facilite le travail ergonomique à proximité du lit.

Solution intelligente : lorsqu'elle est déployée, la protection latérale offre de l'espace supplémentaire en cas de besoin et facilite la mobilisation.

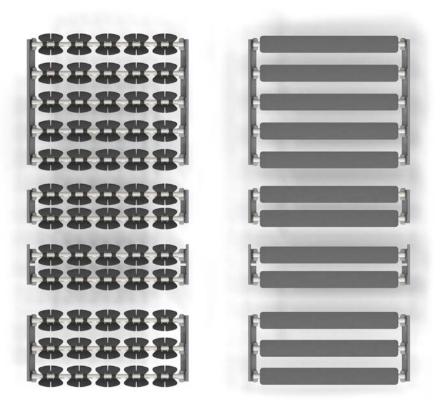

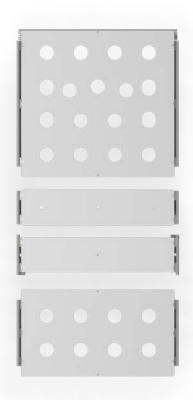

Peaufiné dans ses moindres détails

Trois composants, un système : le confort de couchage idéal.

Les systèmes de couchage Völker se composent de trois éléments : Le cadre en quatre parties réglables, un choix de trois plans de couchage, ainsi que des matelas de haute qualité. Chacun de ces composants est conçu pour répondre aux exigences d'hygiène des hôpitaux. Comme tous les produits Völker, nos systèmes de couchage sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et conçus pour durer.

Harmonieusement combinés : plans de couchage et matelas Völker.



Vous pouvez choisir parmi trois plans de couchage pour nos lits hospitaliers : MiS[®], Stream et HPL.



Des solutions numériques pour des cliniques tournées vers l'avenir.

Grâce aux systèmes d'assistance Sensify, qui peuvent être intégrés départ usine ou ultérieurement au plan de couchage MiS®, vous garantissez une sécurité accrue aux patients et au personnel soignant. Des capteurs d'alarme de lit ou de commutation d'éclairage, par exemple, sont une aide précieuse pour une clinique au quotidien. Entièrement sans fil, sans piles et sans entretien. En outre, nos solutions numériques disponibles en option permettent d'intégrer vos lits hospitaliers à un système de gestion numérique des lits pour un contrôle en direct.

Pour plus d'informations sur nos solutions numériques, rendez-vous sur **voelker.de**

Caractéristiques	S962-2	S962-2W	S 962-2 Vis-a-Vis	S966
Générique et design				
Design S	~	~	~	~
Passage en tunnel de lavage	_	~	_	_
Plage de réglage en hauteur	env. 40 – 80 cm	env. 40 – 80 cm	env. 40 – 71 cm	env. 28,5 – 88,5 cm
Largeur du plan de couchage				
90 cm	~	~	~	~
100 cm	0	0	0	0
Longueur du plan de couchage				
200 cm	~	~	-	~
210 cm	0	0	~	0
Plan de couchage				
Système de micro-stimulation MiS® 1	~	~	~	~
Völker Stream	0	0	-	0
Völker HPL Stratifié haute pression	0	0	0	0
Hauteur de la protection latérale				
Protection latérale mobile en deux parties : 34 – 35,5 cm	~	~	~	~
Protection latérale mobile en deux parties : 37 - 38,5 cm	0	0	0	0
Protection latérale mobile en deux parties : 43,5 - 45 cm	0	0	0	0
Protection latérale fixe en deux parties : 42 - 43,5 cm	0	-	-	0
Dispositif de réception				
Logement unique extérieur	~	~	~	~
Logement double extérieur	0	0	0	0
Élément de commande				
Commande manuelle avec crochet, longitudinale	~	~	-	~
Commande manuelle avec attache, transversale*	0	0	~	0
Commande manuelle du personnel avec verrouillage centralisé, longitudinale	-	-	~	-
Boîtier de contrôle du personnel avec verrouillage individuel, avec/sans fonction automatique à double-clic	~	~	-	~
Boîtier de contrôle du personnel avec verrouillage individuel, avec/sans fonction automatique à double-clic et fonctions avancées	0	0	-	0
Roulettes				
Roulettes simples Integral S (Ø 125 mm)	-	_	-	~
Roulettes simples Integral S (Ø 150 mm)	~	_	_	0
Roulettes simples Integral (Ø 150 mm)	0	~	-	0
Roulettes doubles Linea (Ø 125 mm)	-	_	~	0
Roulettes doubles Twin (Ø 150 mm)	0	-	-	0
Roulettes doubles Linea (Ø 150 mm)	-	-	-	0
Roulette de guidage				
Du côté du pied de lit	~	~	~	✓
Du côté de la tête de lit	0	0	0	0
5° Roulette (possible uniquement pour roulette double Twin 150 mm)	-	-	-	0
Frein central				
Pédale de freinage au niveau du pied de lit, des deux côtés	~	~	~	✓
Équipement en option				
Version Protect	~	-	-	✓

Nous serons ravis de vous conseiller pour les options d'équipement supplémentaire.

UULKER









Siège

Völker GmbH

Wullener Feld 79 58454 Witten Allemagne +49 (0) 2302 960 960

Voelker France SAS

27 rue Maurice Flandin 69444 Lyon Cedex 03 France +33 (0) 18 288 1530

Questions générales

info@voelker.de +49(0)2302960960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2 6003 Luzern Suisse +41(0)44 563 1939

Voelker Nederland B.V.

Laan 21 1741 EA Schagen Pays-Bas +31(0) 20 808 1603

Vente / Service clientèle / Pièces de rechange

kundenservice@voelker.de +49(0)23029609630

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14 6020 Innsbruck Autriche +43 (0) 1 205 8365