



**Sensify**

**Systemes d'assistance**

# TOUJOURS PRÉSENT OÙ QUAND LA CERTITUDE COMPTE

Lorsqu'à l'hôpital ou en établissement de soins des résidents quittent leur lit sans que cela se remarque - tout particulièrement la nuit - le risque de blessure suite à une chute est très élevé. Malgré la surveillance régulière des chambres par le personnel soignant, le risque de chute nocturne reste significatif sans un système d'assistance.


Avec le Système d'Assistance Völker Sensify, vous savez toujours quand et lequel de vos patients ou résidents a besoin d'aide.

## Trois éléments clés

- ✓ Vous savez que personne n'est sorti de son lit plus de temps que nécessaire.
- ✓ Vous savez que personne n'est perdu dans une chambre obscure ou au sol sans assistance
- ✓ Vous savez que personne n'a ouvert sa porte ou quitté sa chambre



Le récepteur radio Sensify est l'élément central du système d'assistance. Il s'utilise pour connecter tous les composants au système d'appel-malade - par câble ou radio.

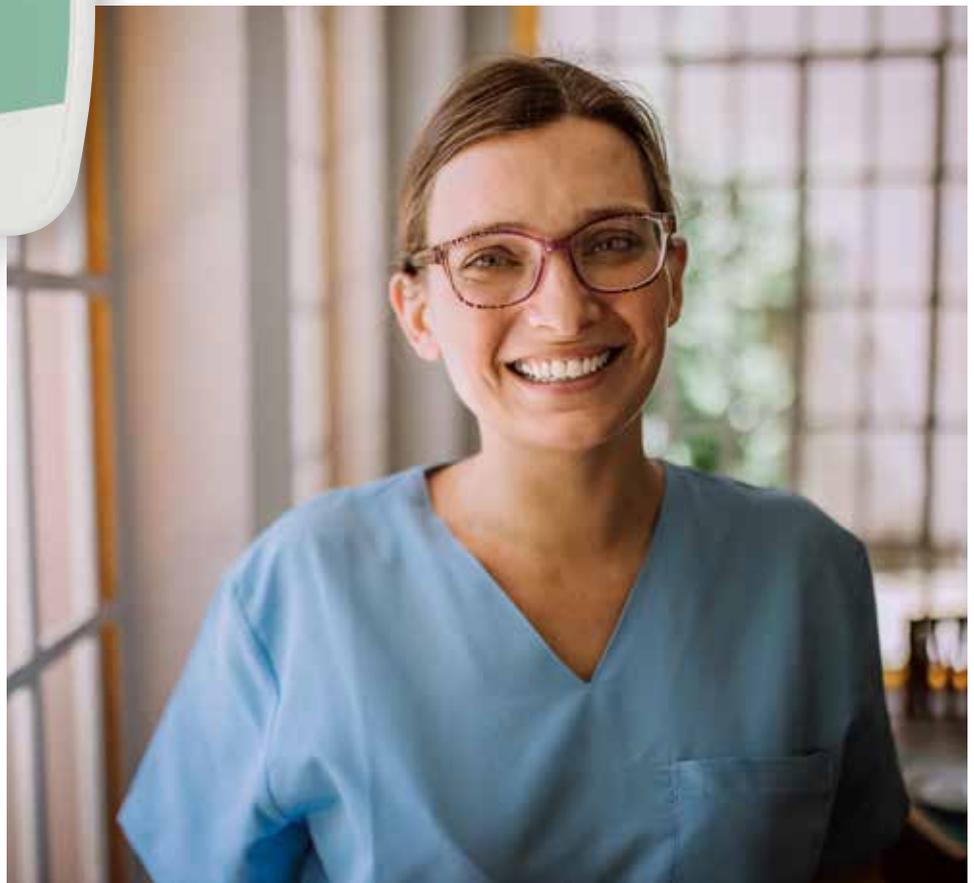


## Assistance ciblée

Le Système d'Assistance Sensify peut être configuré individuellement de manière flexible pour chaque situation. Völker associe de nombreux systèmes d'aide qui offrent aux patients et résidents la sécurité et l'autonomie la plus large possible et aux soignants un niveau de fonctionnalité élevé.

Pour une prévention des chutes efficaces, il est crucial que les équipes soient informées rapidement. Le Système Völker Sensify permet de nombreuses options d'alerte automatique.



La lumière nous permet de nous repérer et procure un sentiment de sécurité; c'est pourquoi elle est un aspect clé de notre système d'Assistance Sensify.

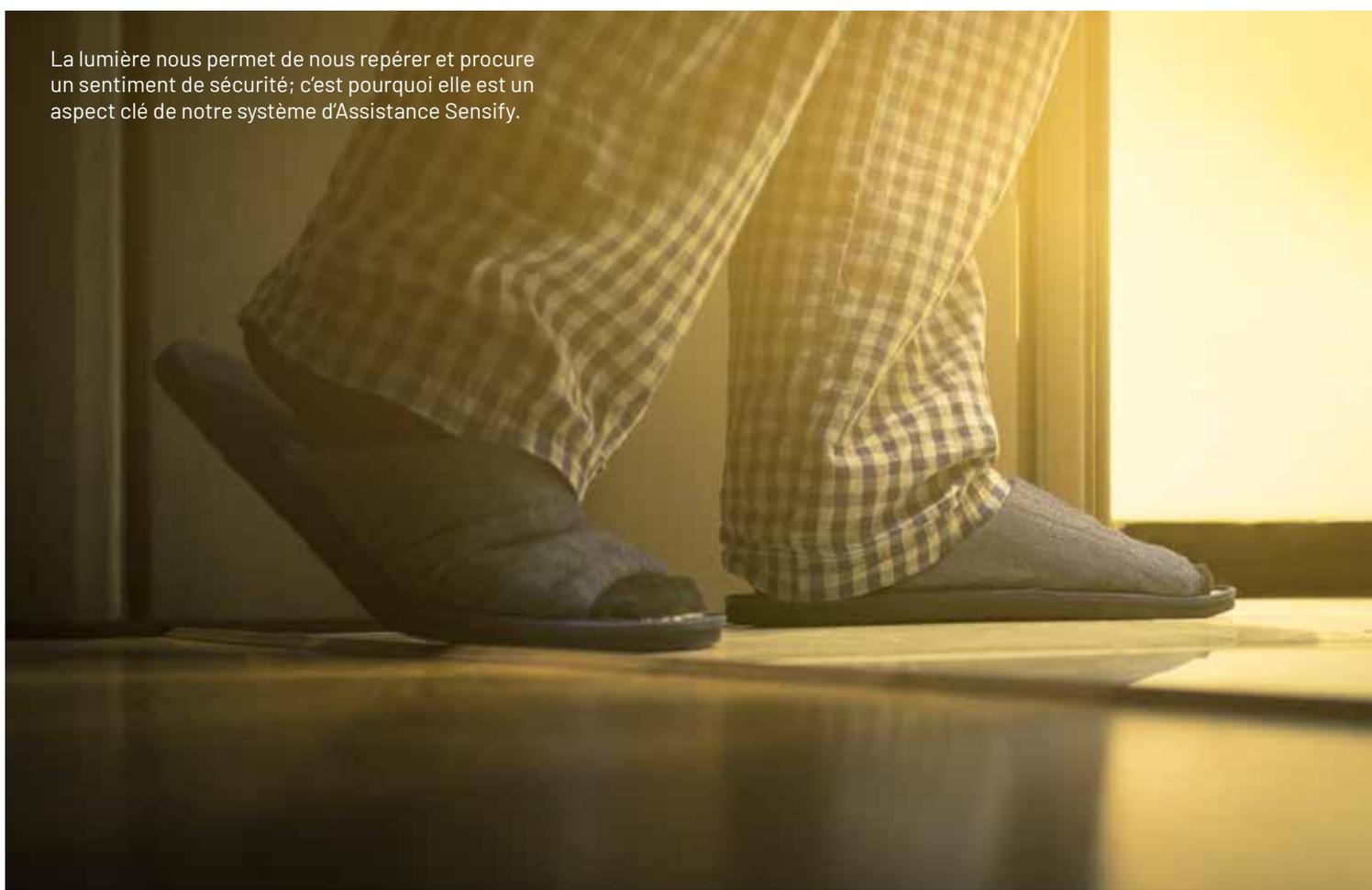

## Un système- des solutions individualisées

### Système d'alarme de lit

Tout le monde est-il au lit? Ou quelqu'un est-il tombé et gît au sol sans assistance? Les capteurs de lit Völker Sensify signalent toute absence si le résident ne réintègre pas son lit dans le laps de temps qui lui est défini.

Cela évite les fausses alarmes, celles qui pourraient être causées par un tour au toilettes, par exemple. Pour les soins, les soignants peuvent très simplement désactiver l'alarme connectée à l'appel-malade en actionnant un interrupteur placé près de la porte. Trois différentes périodes de désactivation peuvent être programmées selon les tâches à effectuer. L'interrupteur a juste à être collé.

- ✓ Compatible avec tous les appels - malades, y compris les systèmes radio.
- ✓ Les équipes soignantes peuvent désactiver le système à tout moment, si nécessaire.
- ✓ Allume ou éteint la lumière automatiquement. Fonctionne avec l'éclairage de votre choix.

Dispositif  
médical



## La flexibilité comme principe directeur

Les systèmes d'assistance Sensify sont d'un usage flexible et ne nécessitent pas une installation permanente. Cela vous donne la liberté de choisir où et quand vous voulez utiliser Völker Sensify.

Si votre taux d'occupation varie, vous pouvez transférer, ajouter ou reconfigurer les éléments à n'importe quel moment, vous offrant ainsi une flexibilité maximale pour un coût maîtrisé.

## Plug & Play

Le système n'est composé que de quelques éléments intuitifs, livrés pré-configurés depuis l'usine. Les trois ou cinq coussinets capteurs qui peuvent être intégrés à votre lit Völker fonctionnent selon le principe de Récolte d'Énergie (Energy Harvesting). La pression du poids du corps ou l'absence de cette pression génèrent une impulsion électrique qui adresse un signal au récepteur Radio Sensify.

**Le système est entièrement sans fil, sans batterie et sans maintenance.**



## Propre, bien rangé et simple

Les capteurs Sensify sont simplement clipsés sur le sommier à Winglet. Ni outils ni fils (pas d'alimentation, pas de câble de données). Pour tout lit de court ou de long séjour Völker construit depuis 2003.

Pour les lits dépourvus de sommier Winglet, Völker propose le système d'alarme de lit Sensify intégré dans un matelas intégrant les capteurs.




**TOUJOURS  
PRÉSENT  
OU QUAND  
LA CERTITUDE  
COMPTE**

## Fonction Interrupteur

La lumière nous permet de nous repérer, augmentant notre sentiment de sécurité. Voir et reconnaître notre environnement nous permet d'agir de façon autonome. Völker Sensify comprend une gamme complète de produits qui favorisent ces capacités.


Sensify fournit deux éléments essentiels: le premier est le capteur de contrôle automatique. Les capteurs du sommier ou le capteur de mouvements placé sous le lit allument la lumière. Lorsque le résident retourne dans son lit, ils éteignent la lumière. Le second est l'interrupteur sans fil qui peut être placé n'importe où dans la chambre, même sur le panneau de lit lui-même. Collez-le tout simplement. Ces deux composants peuvent allumer ou éteindre n'importe quelle lampe - même sa lampe favorite que le résident a rapporté de chez lui.

- ✓ Allume automatiquement une lumière lorsque l'occupant quitte son lit.
- ✓ Les lumières s'allument partout où elles sont nécessaires.
- ✓ Allume ou éteint sans fil n'importe quelle lampe.

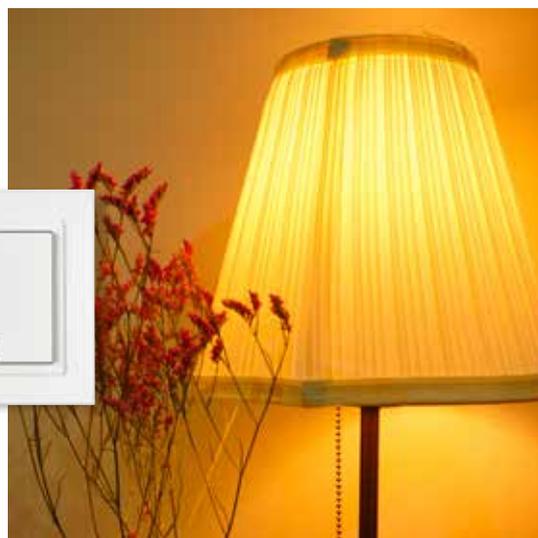

Multiprise radio-contrôlée Sensify et interrupteur sans fil qui utilisables pour n'importe quelle source lumineuse.

## Allumez une source de lumière familière.

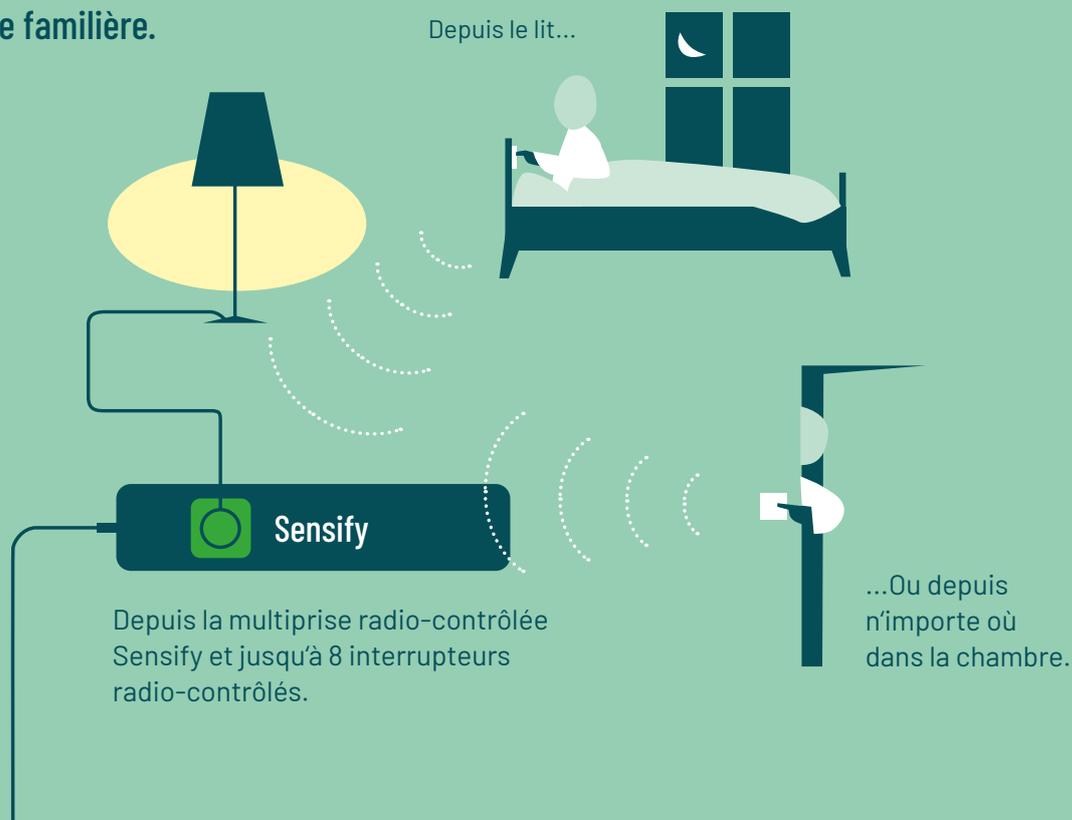

## Bouton d'appel d'urgence

Les situations critiques peuvent surgir à n'importe quel moment et sont souvent insurmontables pour les personnes qui ont besoin d'aide. Sans fils et intuitif, placez le bouton d'appel d'urgence en des lieux faciles d'accès:

- tout près du lit
- à côté des toilettes
- au niveau du sol
- sur le balcon de la chambre (résistant aux aspersion)
- partout où vous le pensez nécessaire

Collez-le et c'est fait! Plusieurs boutons d'urgence Völker Sensify peuvent être connectés dans chaque unité résidentielle. Lorsqu'un bouton d'alarme est pressé, le signal est envoyé via votre système appel malades.

- ✓ Fonctionne avec tous les appel-malades; même les systèmes radio.
- ✓ Jusqu'à 8 éléments peuvent être connectés simplement et sans outils.
- ✓ Large, rouge et robuste. Peut également être positionné au sol pour une activation par les pieds.



## Prévention des fuites / déambulations

Völker Sensify offre des solutions au-delà de la proximité immédiate des lits. Avez-vous des patients ou résidents qui ouvrent les portes? Une action immédiate est-elle nécessaire pour identifier un risque potentiel à temps?

Les résidents présentant une disposition à fuir ou déambuler peuvent être un défi dans la prise en charge des soignants. Garder en tout temps le juste équilibre entre autonomie maximale et sécurité optimale est essentiel.

Les capteurs sans fils qui peuvent être disposés n'importe où dans le cadre de porte pour vous avertir via le système appel-malades peuvent vous être d'une grande aide. Un interrupteur à l'entrée de la chambre permet aux soignants de désactiver la fonction lorsqu'elle n'est pas requise, prévenant efficacement les fausses alarmes.

Collez-le simplement et c'est fait.

- ✓ Une solution sans fil et sans maintenance pour chaque porte.
- ✓ Compatible avec tous les appel-malades, même radio-contrôlés
- ✓ Les soignants peuvent désactiver le système à tout moment, si nécessaire.



Le capteur de porte Sensify fonctionne à l'énergie solaire et est donc auto-suffisant -même à l'extérieur.



**PIÈCES DÉTACHÉES  
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR  
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE  
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ  
DURABLE**

**Siège social**

**Völker GmbH**

Wullener Feld 79  
58454 Witten  
Germany  
+49 (0) 2302 960 960

**Völker Schweiz GmbH**

Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Switzerland  
+41 (0) 44 563 1939

**Völker Medizinprodukte GmbH**

Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Austria  
+43 (0) 1 205 8365

**Voelker France SAS**

27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
France  
+33 (0) 18 288 1530

**Voelker Nederland B.V.**

Laan 21  
1741 EA Schagen  
Netherlands  
+31 (0) 20 808 1603

**Demandes générales**

info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

**Ventes / SAV / Pièces détachées**

kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630