


Matras Shield

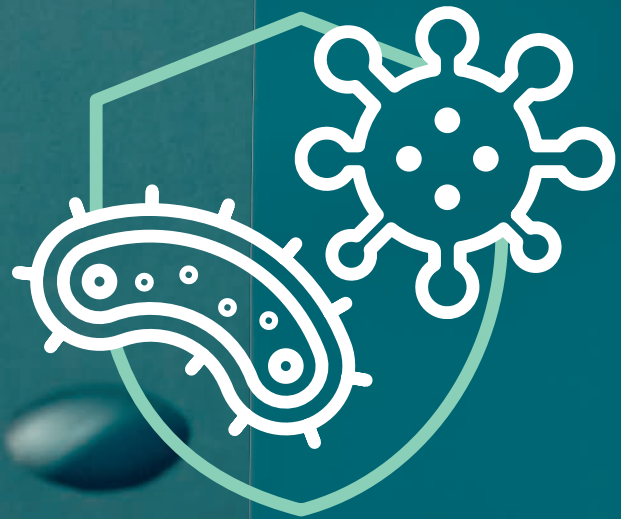

Hygiëne is een van de kernpunten in de gezondheidszorg. Veiligheid en welzijn staan bij Völker altijd voorop, zowel voor uw medewerkers als voor patiënten en bewoners. Naast de hoge kwaliteit van zijn matrassen biedt Völker met de uitvoering Shield een combinatie van bewezen comfort en uitgebreide bescherming voor nog meer betrouwbaarheid.

- ✓ Virus- en bacteriebestendige hygiënische hoes met antibacteriële behandeling
- ✓ Hoes met stoom steriliseerbaar in een autoclaaf, wasbaar en chemisch reinigbaar
- ✓ Waterdichte ritssluiting en afgedichte naden
- ✓ Zeer elastische 2-zone matraskern met uitstekend comfort en drukontlasting (Völker Comfort 2000)

Technische gegevens

breedte x diepte x hoogte 88 x 200 x 12 cm

Hoes:

- Antibacteriële behandeling, bacteriedichtheid volgens EN 13795
- Waterdichtheid volgens EN 20811: > 3000mm Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 53122 / klimaat B: ca. 800 g/m²d
Afgedichte naden, waterdichte ritssluiting
- Wasbaar: tot 95 °C, kan in de droger, chemisch reinigbaar, met stoom steriliseerbaar in een autoclaaf tot 105 °C
- Bestand tegen bloed, urine, olie, vet en desinfectiemiddelen volgens DGHM
- Twee versterkte draaglussen voor eenvoudig hanteren
- Biocompatibiliteit (cytotoxiciteit) volgens EN ISO 10993-5, biocompatibiliteit (irritatie + huidgevoeligheid) volgens EN ISO 10993-10
- 100% dampdoorlaatbare PU-coating, zonder latex of pvc
- 100% elastisch dragermateriaal van polyester
- Getest op schadelijke stoffen volgens Ökotex Standard 100
- Brandveiligheid volgens EN ISO 12952-1 & -2 en BS 7175 sec. 3 crib 5 + 7, brandvertragend volgens DIN 597 1+2
- Hydrolysebestendig, formaldehydevrij vervaardigd

Kern (Völker Comfort 2000):

- Zeer elastische 2-zone schuimstofmatras met Rubex®-koudschuim
- Uitstekend comfort en drukontlasting, optimaal wegzak-/ondersteunend gedrag
- Verticaal en horizontaal geprofileerd voor optimale drukverdeling
- Supersofte hielcomfortzone met dichtheid 50
- 10 cm versterkte randen aan de zijkanten
- Ligopervlak dichtheid 50 kg/m³; compressiehardheid 3,0 kPa
- Trekvastheid – EN ISO 1798 – kPa ≥ 80
- Rek bij breuk – EN ISO 1798 – % ≥ 130
- Drukvervormingsrest – EN ISO 1856 – % - ≤ 6
- Vlamgedrag voldoet aan DIN 75200 / FMVSS 302
- Gefractioneerde stoomsterilisatie tot 75 °C
- CFK-vrij; 100% soortzuiver
- Ökotex Standard 100, klasse 1 gecertificeerd (producten voor baby's)
- Onderhoes beschermt tegen vuil en maakt hoes verschoneren makkelijker
- Dikte kernlaag: 12cm

